



GYIK és további információkért látogasson el ide:


www.eufylife.com



Egészség & Wellness

**Használati
útmutató**

A dobo tartalma

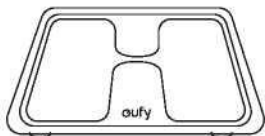

C1 Intelligens mérleg



AAA elem (x3)



Felhasználói kézikönyv és
gyors útmutató

Helyezze be az elemeket


① Fordítsa meg a mérleget, és tegye egy sima felületre.

② Nyissa ki az elemtartó ajtaját, és tegyen be három AAA elemet.

Győződjön meg arról, hogy a pozitív és a negatív végek az elemtartóban jelölt helyes polaritási irányok felé néznek.

- A "8888" számjegyek megjelennek a LED-kijelzőn.


③ Csatolja be az elemtartó ajtaját, és várja meg, amíg a "00" számjegyek megjelennek a LED kijelzőn:

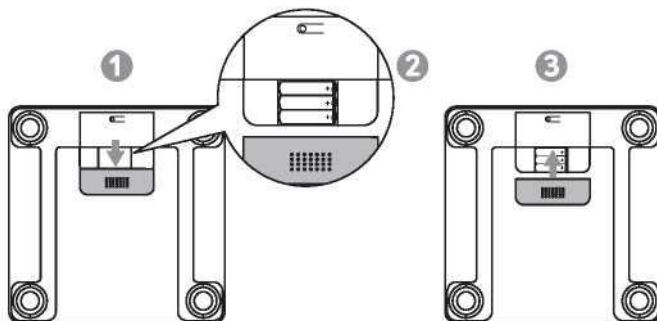

LO akkor jelenik meg a LED-kijelzőn, ha az elemek lemerültek.
Cserélje mind a három elemet egyszerre. Ne keverjen új és használt elemeket.


A mértékegység kiválasztása


Nyomja meg az **UNIT** gombot a skála alján, hogy áttérjen és kiválassza a mérési egységet: **lb** (font) / **kg** (kilogramm). A mértékegység az EufyLife alkalmazásból is kiválasztható.

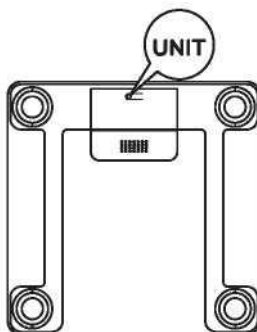

Az EufyLife alkalmazás telepítése és párosítás

- 1 Töltse le az EufyLife alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).
- 2 Engedélyezze a Bluetooth-t okostelefonján vagy táblagépén.
- 3 Nyissa meg az EufyLife alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a mérleg és eszköz párosításához.

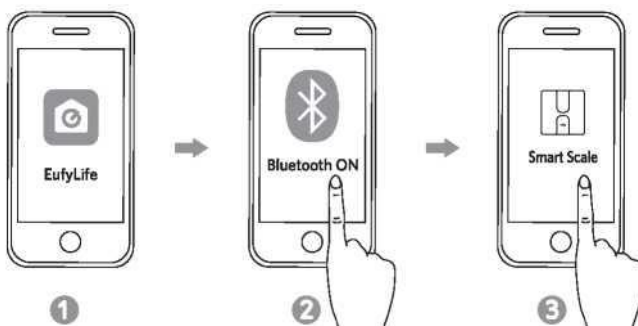

|  | Állapotikon | Mit jelez |
|---|-------------|----------------|
| | Villog | Párosítás |
| | Folyamatos | Csatlakoztatva |



- Ez a mérleg kompatibilis az iOS 8.0 vagy újabb vagy az Android 4.3 vagy újabb operációs rendszert futtató eszközökkel.

- Ne párosítsa a mérleget az okostelefon Bluetooth menüjéből. Használja az EufyLife alkalmazást a mérleg és az okostelefon párosításához.

Mérés indítása

Az első mérés megkezdése előtt létre kell hoznia és be kell állítania egy felhasználói azonosítót az EufyLife alkalmazásban. Legfeljebb 16 felhasználói azonosító hozható létre.

1

Helyezze a mérleget kemény és sík felületre.

2

Nyissa meg az EufyLife alkalmazást, és válassza az intelligens skálát az eszköz honlapján.



Mezítláb lépjen a mérleg közepére. Álljon mozdulatlanul és maradjon teljes kapcsolatban az elektródákkal, amíg a mérés befejeződik.





Csak súlymérés

Ez a mérleg hagyományos súly leolvasási mérlegként is használható. Az EufyLife alkalmazás megnyitása nélkül egyszerűen léphet a skálán az aktuális súly méréséhez.

Karbantartás

Rendszeresen tisztítsa meg a mérleget száraz vagy enyhén nedvesített puha ruhával.

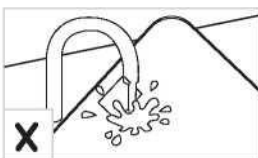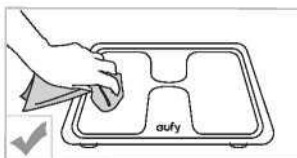

- Ne mossa vízzel a mérleget, és ne merítse vízbe.
- Soha ne használjon mosószereket a mérleg tisztításához, mert ez meghibásodást vagy elszíneződést okozhat.

Hibaelhárítás

Hiba üzenet

| Hiba kijelzés | Leírás | Megoldás |
|---------------|--|--|
| OL | Túlterhelés. A készülék kikapcsol. | Ne használja ezt a mérleget méréshez. |
| Lo | Lemerült az akkumulátor. A készülék kikapcsol. | Cserélje mind a három elemet egyszerre. |
| Err | Mérési hiba. | <ul style="list-style-type: none">■ Lépjen mezítláb, és tartsa teljes kapcsolatban az elektródákkal.■ Álljon mozdulatlanul, amíg a LED-kijelzőn a mérés meg nem rögzül. |

Mérés közben

| Probléma | Ok | Megoldás |
|--|--|---|
| Rendellenes mérési eredmények: | <ul style="list-style-type: none"> Helytelen testtartás. | Mezítláb lépjen a mérlegre és álljon mozdulatlanul. |
| <ul style="list-style-type: none"> Túl magas Túl alacsony Nagy különbség két legutóbbi mérés között | <ul style="list-style-type: none"> A készüléket puha szőnyegre vagy egyenetlen felületre helyezzük. | Helyezze a készüléket kemény és sík felületre. |
| A LED-kijelző nem kapcsol be, miután rálépett a mérlegre. | <ul style="list-style-type: none"> Az elemek nincsenek behelyezve. Elhasznált elemek. | <ul style="list-style-type: none"> Helyezzen be három új elemet. Cserélje ki mind a három elemet egyszerre. |
| A mérleg nem folytatja a testösszetétel elemzését. | <ul style="list-style-type: none"> Mérés végrehajtása cipő vagy zokni viselése közben. | <ul style="list-style-type: none"> Mérés közben álljon mezítláb a mérlegen, és tartsa a lábát teljes érintkezésben az elektródákkal. |

Specifikációk

| | |
|--------------------------------|--|
| termék modell | T9146 |
| Áramforrás | 4,5 V (3 x AAA elem) |
| LED kijelző | 67 x 29 mm |
| Mértékegységek | Font / Kilogramm |
| Egységnövekmények | 0,1 lb / 0,1 kg |
| Testzsír egységek növekményei | 0,1% |
| A testvíz egységek növekményei | 0,1% |
| Izomtömeg-egységek | 0,1% |
| Mérési tartomány | 5-180 kg, 11-397 font |
| Munkakörnyezet | Hőfok: 5 - 40 °C Páratartalom: 20-90% relatív páratartalom |
| Tárolási környezet | Hőmérséklet: -20-50 ° C Páratartalom: <= 90% relatív páratartalom |
| Működési frekvenciatartomány | 2402 - 2480 MHz |
| Rádiófrekvenciás áram | 4 dBm |
| Dimenzió | 280 x 280 x 23 mm |
| Nettó tömeg | 1,5 kg |

Vevőszolgálat



15 hónapos korlátozott garancia



Egész élettartamon át tartó műszaki támogatás



support@eufylife.com



(US) +1 (800) 988 7973 Mon - Fri 9:00am - 5:00pm (PT)

(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon - Fri 6:00 - 11:00 (GMT)

(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo - Fr 6:00 - 11:00

(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

(日本) +81 03 4455 7823 月 - 金 9:00 - 17:00



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial