



GYIK, illetve további információkért látogasson el ide:


www.eufylife.com



Egészség & Wellness

**Használati
útmutató**

A doboz tartalma

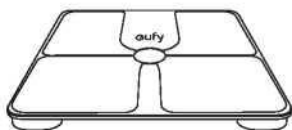

P1 Okosmérleg



AAA elem (x3)



Használati útmutató &
Egyéb dokumentumok

Helyezze be az elemeket


Fordítsa meg a mérleget, és helyezze egy sima felületre. ¹

Nyissa ki az elemtartó ajtaját, és tegyen be három AAA elemet. ²

Győződjön meg arról, hogy a pozitív és a negatív végződések az elemtartóban jelölt helyes polaritási irányok felé nézzenek.

- A "8888" számjegyek megjelennek a LED-kijelzőn.

³ Csatolja be az elemtartó ajtaját, és várja meg, amíg a "00" számjegyek megjelennek a LED kijelzőn:

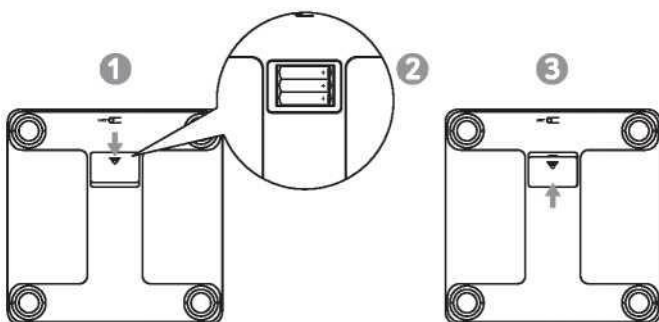


Lo

akkor jelenik meg a LED-kijelzőn, ha az elemek lemerültek.
Cserélje mind a három elemet egyszerre. Ne keverjen új és használt elemeket.


A mértékegység kiválasztása


Nyomja meg az **UNIT** gombot a skála alján, hogy áttérjen és kiválassza a mérési egységet: **lb (font)** / **kg** (kilogramm). A mértékegység az EufyLife alkalmazásból is kiválasztható.

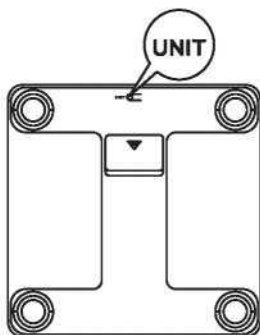

Az EufyLife alkalmazás telepítése és párosítás

- 1 Töltse le az EufyLife alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).
- 2 Engedélyezze a Bluetooth-t okostelefonján vagy táblagépén.
- 3 Nyissa meg az EufyLife alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a mérleg és az eszköz párosításához.

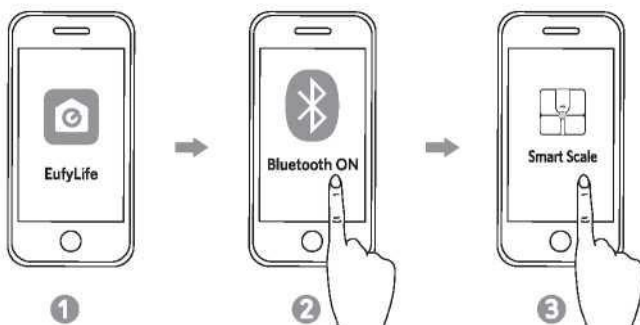

	Állapotikon	Mit jelez
	Villog	Párosítás
	Folyamatos	Csatlakoztatva



- Ez a mérleg kompatibilis az iOS 9.0 vagy újabb vagy az Android 4.4 vagy újabb rendszert futtató eszközökkel.

- Ne párosítsa a mérleget az okostelefon Bluetooth menüjéből. Használja az EufyLife alkalmazást a mérleg és az okostelefon párosításához.


Mérés indítása

Az első mérés megkezdése előtt létre kell hoznia és be kell állítania egy felhasználói azonosítót az EufyLife alkalmazásban.

- 1 Helyezze a mérleget kemény és sík felületre.
- 2 Nyissa meg az EufyLife alkalmazást, és válassza az intelligens mérleg az eszköz honlapján.
- 3 Mezítláb lépjen a mérlegre. A test összetételének elemzése



Mezítláb lépjen a mérleg közepére. Álljon mozdulatlanul és maradjon teljes kapcsolatban az elektródákkal, amíg a mérés befejeződik.

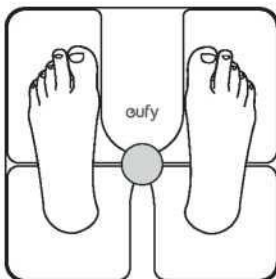

Csak súlymérés



Ez a mérleg hagyományos súly-leolvasási mérlegként is használható.

A jelenlegi súlyának méréséhez a következőket teheti

- lépjen a mérlegre a cipő viselésével; vagy
- válassza ki a csak súlymérési módot az EufyLife alkalmazásban.

Karbantartás


Rendszeresen tisztítsa meg a mérleget száraz vagy enyhén nedvesített puha ruhával.

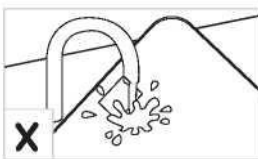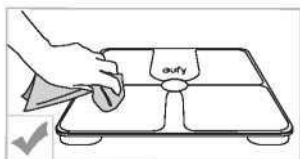

- Ne mossa vízzel a mérleget, és ne merítse vízbe.
- Soha ne használjon mosószereket a mérleg tisztításához, mert ez meghibásodást vagy elszíneződést okozhat.

Hibaelhárítás

Hibaüzenet

Hiba kijelzés	Leírás	Megoldás
	Túlterhelés. A készülék kikapcsol.	Ne használja tovább mérésre a mérleget.
	Lemerült az akkumulátor. A készülék kikapcsol.	Cserélje mind a három elemet egyszerre.
	Mérési hiba.	<ul style="list-style-type: none">■ Lépjen mezítláb, és maradjon teljes kapcsolatban az elektródákkal.■ Álljon mozdulatlanul, amíg a LED-kijelzőn a mérés meg nem rögzül.

Mérés közben

Probléma	Ok	Megoldás
<p>Rendellenes mérési eredmények:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Túl magas • Túl alacsony • Nagy különbség két legutóbbi mérés között 	<ul style="list-style-type: none"> • Helytelen testtartás. • A készüléket puha szőnyegre vagy egyenetlen felületre helyezzük. ■ Nincsenek behelyezve az elemek. 	<p>Mezítláb lépjen a mérlegre és álljon mozdulatlanul.</p> <p>Helyezze a készüléket kemény és sík felületre.</p>
<p>A LED-kijelző nem kapcsol be, miután rálépett a mérlegre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elhasznált elemek. ■ Mérés végrehajtása cipő vagy zokni viselése közben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Helyezzen be három új AAA elemet • Cserélje mind a három elemet egyszerre.
<p>A mérleg nem folytatja a testösszetétel elemzését.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Csak súlymérő mód használata az EufyLife alkalmazásban. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mérés közben álljon mezítláb a mérlegen, és tartsa a lábát teljes érintkezésben az elektródákkal. • Módosítsa a mérési módot az EufyLife alkalmazásban.

Specifikációk

Áramforrás	4,5 V (3 x AAA elem)
LED kijelző	67 x 29 mm
Mértékegységek	Font / Kilogramm
Egységnövekmények	0,1 lb / 0,1 kg
Testzsír egységek növekményei	0,1%
A testvíz egységek növekményei	0,1%
Izomtömeg-egységek	0,1%
Mérési tartomány	11-397 font között / 5-180 kg között
Alkalmazási környezet	Hőfok: 5 - 40 ° C Páratartalom: 20-90% relatív páratartalom
Tárolási környezet	Hőmérséklet: -20-50° C között Páratartalom: <= 90% relatív páratartalom
Működési frekvenciatartomány	2402 - 2480 MHz
Rádiófrekvenciás teljesítmény	4 dBm
Méret	280 x 280 x 24 mm
Nettó tömeg	1. 5 kg

Vevőszolgálat

Gyakran ismételt kérdések és további információkért látogasson el a www.eufylife.com weboldalra.

✉ Email: support@eufylife.com

💬 Live chat: www.eufylife.com

☎ Customer service hotline:

(US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00am - 5:00pm (PT)

(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)

(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00

(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

(日本) +81 03 4455 7823 月-金 9:00 - 17:00



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial